

LETAH OXY HPC

DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO COM AÇÃO DE LIMPEZA

- Indicado para desinfecção de superfícies fixas em áreas críticas, semicríticas e não críticas da área da saúde (hospitais, laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas, estéticas e odontológicas);
- Proporciona uma higienização 3 em 1: Excelente poder de limpeza, ação alvejante em manchas impregnadas e desinfecção de superfícies;
- Promove a higienização (limpeza e desinfecção) em uma única etapa, otimizando o processo;
- Na diluição de nível intermediário, o LETAH OXY HPC é indicado para artigos de inaloterapia e assistência ventilatória;
- Remove de maneira rápida e eficiente as manchas sensíveis à oxidação, a exemplo de sangue;
- Seguro para superfícies coloridas;
- Eficaz na remoção de maus odores;
- Ação bactericida comprovada contra: Staphylococcus aureus; Salmonella enterica subsp; enterica serovar choleraesuis; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecalis VRE, Candida auris, Staphylococcus aureus MRS; Trichophyton mentagrophytes (Trichophyton interdigitale priestley); Candida albicans; Mycobacterium smegmatis; Mycobacterium bovis (BCG); Clostridium difficile; Klebsiella pneumoniae; Listeria monocytogenes;
- Contém tensoativos biodegradáveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO:

- Higienização de superfícies fixas (piso, parede, teto, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc.) em áreas críticas (UTI, Centro Cirúrgico, UTI Neonatal, Unidade de Diálise, Unidade de Transplante, Unidade de Queimados, Unidade de Isolamento, Área Suja da Lavanderia entre outros), semicríticas (Unidade de internação, ambulatórios, banheiros, central de triagem, postos de enfermagem entre outros) e não críticas (áreas administrativas, almoxarifados entre outros): diluir o LETAH OXY HPC conforme recomendação, aplicar a solução na superfície com auxílio de pano descartável, pano microfibra ou fibra de limpeza. Deixar agir por 10 minutos. Se houver necessidade enxaguar e secar. Se houver matéria orgânica na superfície, o ideal é que seja removido antes do procedimento conforme recomendação da ANVISA.
- Higienização de artigos não críticos (Termômetros, medidores de pressão, estetoscópio entre outros equipamentos que entram em contato com a pele íntegra do paciente).
- Higienização de artigos semicríticos (artigos de inaloterapia e assistência ventilatória).

EMBALAGEM:

O LETAH OXY HPC é apresentado em bombonas de 5L.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:


Manter o produto em sua embalagem original e fechada, longe de produtos clorados e em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Armazenar o produto afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis – Vide Ficha de Segurança do Produto.

COMPOSIÇÃO:

Peróxido de hidrogênio, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, coadjuvantes, solvente, controladores de pH, acidificante, aditivo, sequestrante e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:

Peróxido de Hidrogênio – 3,75%

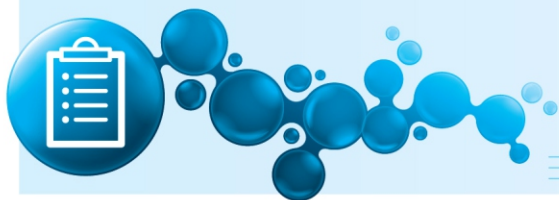

LETAH OXY HPC

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido Translúcido
Cor..... Levemente amarelado
Odor.....Característico
pH (100%).....0,5 - 1,1
Densidade a 30 °C.....1,031 ± 0,002

MODO DE USO:

-Desinfecção de nível intermediário. Lavar, enxaguar e secar os artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Imergir os artigos na solução 6,25%, deixando em contato por 10 minutos. Deixar secar ao ar ou enxaguar, se necessário. Utilizar o mais breve possível.

-Limpeza e desinfecção de superfícies fixas em uma única etapa e desinfecção de artigos não críticos – Aplicar solução a 1,5%, deixando em contato por 10 minutos. Deixar secar ao ar ou enxaguar, se necessário.

- Limpeza pesada de pisos e superfícies em geral – Aplicar solução a 0,5%, deixar secar ao ar ou enxaguar, se necessário.

Quando aplicado em pisos, isole a área e não abra para a circulação até que o piso esteja seco, não escorregadio.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto em sua embalagem original e fechada, longe de produtos clorados e em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Armazenar o produto afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis – Vide Ficha de Segurança do Produto.

PERIGO: PROVOCA LESÕES OCULARES E QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO.

CUIDADO! Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções utilize luvas, avental e óculos de segurança. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não inale vapores. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 722 6001. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Não misture com água na embalagem original.

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS. NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO. CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Fabricado por INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sob licença da ISO INDÚSTRIA DE SABÕES E ÓLEOS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Lorenzo
CRQ: 071000920-BA
REGISTRO MS: 337010009
VÁLIDO POR 24 MESES, a partir da data de fabricação.

Rev.: 002/24